

RELIAMED - zinc oxide, calamine dressing

Reliamed

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Drug Facts

Active Ingredients

Zinc Oxide 25%

Calamine 1%

Purpose

Skin Protectant

Uses

- Dries the oozing and weeping of poison ivy, poison oak, or poison sumac.
- Ideal for the managing extremities (e.g. varicose ulcers) requiring protection and support.

Warning

For external use only.

If condition worsens or does not improve within 7 days, consult a doctor.

Avoid Contact with eyes.

Keep this and all medicines out of children's reach.

Directions

- Begin bandaging at base of toes, without pressure, keeping foot and leg at right angle. Continue bandaging beyond ankle, doubling back to ensure molding to contours of leg (STEP 1).
- Complete bandaging to just below the knee (STEP 2).
- Apply an elastic adhesive bandage (STEP 3).

Other Ingredients

Acacia, Castor oil, Glycerin, and White Petrolatum.

Principal Display Panel

NDC 52641-300-03

REORDER NO. ZGUBC3

ReliaMed®

UNNA BOOT

DRESSING
With Calamine

VENDA MOLDEABLE DE
APOSITO CON POMADA
Con Calamina

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)
Stretched
1 Each/Pieza

3 in

Do not reuse. Single use only.
No vuelva a utilizar. Estos apositos son de un solo uso.


59° - 77° F (15 - 25° C) Store at ambient temperature
59° - 77° F (15 - 25° C) Imacene a temperatura ambiente.

Keep Dry. Do not store in damp conditions.
Mantengase seco. No almacenar bajo condiciones humedas.

Distributed By ReliaMed® Distribuido por ReliaMed®
Ft. Worth, TX 76106 1-800-409-2848

Made in Mexico. Hecho en Mexico

Rev. 03311

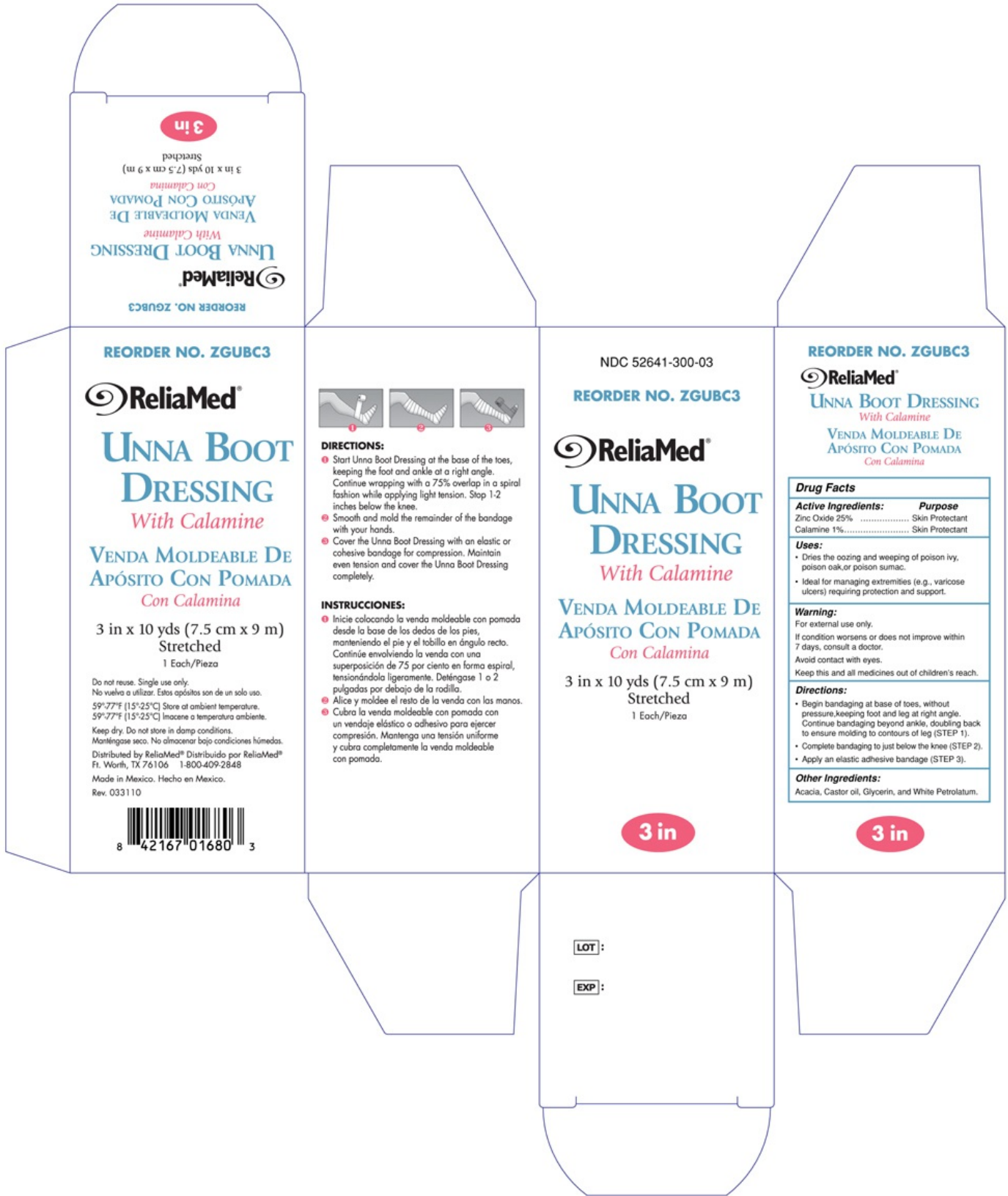

REORDER NO. ZGUBC3



UNNA BOOT DRESSING
With Calamine

VENDA MOLDEABLE DE APÓSITO CON POMADA
Con Calamina

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)
Stretched
1 Each/Pieza

Do not reuse. Single use only.
No vuelva a utilizar. Estos apósitos son de un solo uso.
59°-77°F (15°-25°C) Store at ambient temperature.
59°-77°F (15°-25°C) Inocense a temperatura ambiente.
Keep dry. Do not store in damp conditions.
Manténgase seco. No almacenar bajo condiciones húmedas.
Distributed by ReliaMed® Distribuido por ReliaMed®
Ft. Worth, TX 76106 1-800-409-2848
Made in Mexico. Hecho en Mexico.
Rev. 033110



DIRECTIONS:

- 1 Start Unna Boot Dressing at the base of the toes, keeping the foot and ankle at a right angle. Continue wrapping with a 75% overlap in a spiral fashion while applying light tension. Stop 1-2 inches below the knee.
- 2 Smooth and mold the remainder of the bandage with your hands.
- 3 Cover the Unna Boot Dressing with an elastic or cohesive bandage for compression. Maintain even tension and cover the Unna Boot Dressing completely.

INSTRUCCIONES:

- 1 Inicie colocando la venda moldeable con pomada desde la base de los dedos de los pies, manteniendo el pie y el tobillo en ángulo recto. Continúe envolviendo la venda con una superposición de 75 por ciento en forma espiral, tensionándola ligeramente. Deténgase 1 o 2 pulgadas por debajo de la rodilla.
- 2 Alice y moldee el resto de la venda con las manos.
- 3 Cubra la venda moldeable con pomada con un vendaje elástico o adhesivo para ejercer compresión. Mantenga una tensión uniforme y cubra completamente la venda moldeable con pomada.

NDC 52641-300-03

REORDER NO. ZGUBC3



UNNA BOOT DRESSING
With Calamine

VENDA MOLDEABLE DE APÓSITO CON POMADA
Con Calamina

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)
Stretched
1 Each/Pieza

3 in

LOT:

EXP:

REORDER NO. ZGUBC3



UNNA BOOT DRESSING
With Calamine
VENDA MOLDEABLE DE APÓSITO CON POMADA
Con Calamina

Drug Facts

Active Ingredients:	Purpose
Zinc Oxide 25%	Skin Protectant
Calamine 1%	Skin Protectant

Uses:

- Dries the oozing and weeping of poison ivy, poison oak or poison sumac.
- Ideal for managing extremities (e.g., varicose ulcers) requiring protection and support.

Warning:

For external use only.
If condition worsens or does not improve within 7 days, consult a doctor.
Avoid contact with eyes.
Keep this and all medicines out of children's reach.

Directions:

- Begin bandaging at base of toes, without pressure, keeping foot and leg at right angle. Continue bandaging beyond ankle, doubling back to ensure molding to contours of leg (STEP 1).
- Complete bandaging to just below the knee (STEP 2).
- Apply an elastic adhesive bandage (STEP 3).

Other Ingredients:

Acacia, Castor oil, Glycerin, and White Petrolatum.

3 in

NDC 52641-300-04

REORDER NO. ZGUBC4

ReliaMed®

**UNNA BOOT
DRESSING
With Calamine**

VENDA MOLDEABLE DE
APOSITO CON POMADA
Con Calamina

4 in x 10 yds (10 cm x 9 m)
Stretched
1 Each/Pieza

4 in

Do not reuse. Single use only.
No vuelva a utilizar. Estos apositos son de un solo uso.


59° - 77° F (15 - 25° C) Store at ambient temperature
59° - 77° F (15 - 25° C) Imacene a temperatura ambiente.

Keep Dry. Do not store in damp conditions.
Mantengase seco. No almacenar bajo condiciones humedas.

Distributed By ReliaMed® Distribuido por ReliaMed®
Ft. Worth, TX 76106 1-800-409-2848

Made in Mexico. Hecho en Mexico

Rev. 03311

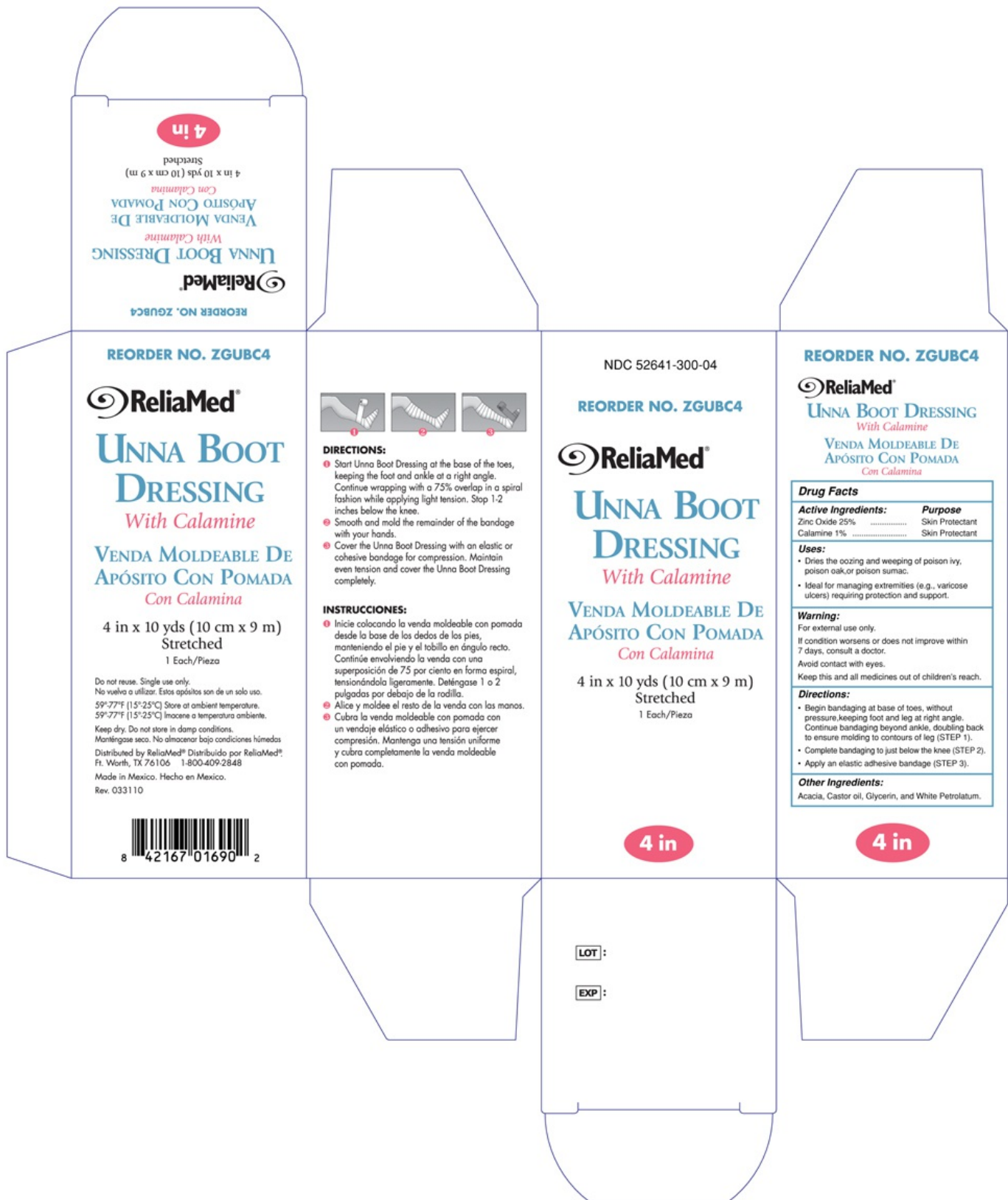

RELIAMED

zinc oxide, calamine dressing

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:52641-300
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC OXIDE	25 g
FERRIC OXIDE RED (UNII: 1K09F3G675) (FERRIC OXIDE RED - UNII:1K09F3G675)	FERRIC OXIDE RED	0.015 g
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC OXIDE	0.985 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
ACACIA (UNII: 5C5403N26O)	
CASTOR OIL (UNII: D5340Y2I9G)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
PETROLATUM (UNII: 4T6H12BN9U)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:52641-300-03	1 in 1 BOX		
2	NDC:52641-300-04	1 in 1 BOX		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	part347	08/13/2010	

Labeler - Reliamed (049386139)