

FENDALL PURE FLOW- purified water liquid
Honeywell Safety Products USA, Inc.

0498-0630: Fendall Pure Flow 1000

Active ingredient

Purified Water 98.6%

Purpose

Emergency Eyewash

Uses

For flushing or irrigating the eye to reduce chances of severe injury caused by acid, alkali, or particulate contamination

Warnings

For external use only

Obtain immediate medical treatment for all open wounds in or near the eyes

Do not use

- if solution changes color or gets cloudy
- with contact lenses
- in open wounds in or near the eyes
- if the eye is lacerated or object imbedded

Stop use and ask a doctor if you have

- changes in vision
- eye pain
- continued redness or irritation of the eyes or if the condition worsens or persists

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

Directions

remove contacts before using

flush the affected area as needed

if necessary continue flushing with emergency eyewash or shower

Other information

- store at room temperature, 59 ° to 86 ° F (15 ° to 30 ° C)
- do not freeze
- to avoid contamination, do not touch tip of container to any surface
- once opened, discard
- do not reuse

Inactive ingredients


benzalkonium chloride, edetate disodium, sodium chloride, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic

Questions?

1-800-430-5490


Honeywell Safety Products USA, Inc. 855 S. Mint Street, Charlotte, NC, 28202

Principle Display Panel




#32-001050-0000
Cartridge for /
Cartucho para /
Cartouche pour /
Fendall Pure Flow 1000®


**INSTALL CARTRIDGE WITH ARROW POINTING TO BACK OF UNIT /
INSTALE EL CARTUCHO CON LA FLECHA APUNTANDO HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD /
INSTALLER LA CARTOUCHE EN ORIENTANT FLÈCHE VERS L'ARRIÈRE DU BASSIN**




**FRONT /
FRENTE /
AVANT**



**SLOT A /
RANURA A /
FENTE A**



**BACK /
PARTÉ POSTERIOR /
ARRIÈRE**

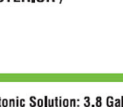

⚠️WARNING!
FOR PROPER OPERATION:
1) Read all warnings and the Operation and Installation Manual prior to installation of the cartridges. Failure to follow these installation instructions and warnings may result in personal injury, serious illness, including blindness or death.
2) Inspect cartridges for damage: If the nozzle assembly, flexible solution bag or carton has been damaged, or the nozzle assembly or bag is leaking fluid, DO NOT INSTALL! Call 1-800-430-5490.
3) The top of the carton must be unobstructed and free from damage.
4) Install cartridges (two required) in the Fendall Pure Flow 1000 with Slot A to the rear and the nozzle assembly in front.
5) Each cartridge weighs 32 lbs. (14,5 kg). Use caution when handling and installing.
6) Cartridges must be replaced after use and on, or before the solution expiration date printed on the carton and activating strap.

⚠️¡ADVERTENCIA!
PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO:
1) Lea todos los advertencias y el manual de instalación y funcionamiento antes de instalar los cartuchos. El no seguir estas instrucciones de instalación ni las advertencias podría ocasionar serias lesiones personales, enfermedades serias, incluidas ceguera o la muerte.
2) Inspeccione los cartuchos: Si el ensamblaje de la boquilla, la bolsa flexible de solución o la caja han sido dañados, o hay fugas de líquido en el ensamblaje de la boquilla o la bolsa, NO LOS INSTALE! Llame al 1-800-430-5490.
3) La parte superior de la caja y la ranura en la parte posterior de la caja debe estar libre de obstrucciones y de daños.
4) Instale los cartuchos (se necesitan dos) en la unidad Fendall Pure Flow 1000 con la ranura "A" hacia la parte posterior y el ensamblaje de la boquilla en el frente.
5) Cada cartucho pesa 14,5 kg (32 libras). Tenga cuidado al manejarlos e instalarlos.
6) Los cartuchos deben reemplazarse después de su uso y en, o antes, de la fecha de expiración de solución impreso en la tira de activación.

⚠️AVERTISSEMENT!
POUR ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT:
1) Lire tous les avertissements et le Guide d'installation et de fonctionnement avant d'installer les cartouches. Ne pas suivre ces instructions d'installation ni ces avertissements risque de provoquer de graves blessures corporelles, des maladies graves voire la cécité ou la mort.
2) Inspecter les cartouches pour vérifier s'il n'y a pas de dommage. Si les gicleurs, le sac souple de solution ou le carton sont endommagés, ou si les gicleurs ou le sac présentent une fuite, NE PAS LES INSTALLER! Téléphoner sans frais au : 1-800-212-7233.
3) S'assurer que le dessus du carton et la fente située à l'arrière de ce dernier sont dégagés et intacts.
4) Installer les cartouches (deux sont requis) dans le bassin Fendall Pure Flow 1000, en s'assurant d'orienter la Fente A vers l'arrière et les gicleurs vers l'avant.
5) Chaque cartouche pèse 14,5 kg (32 livres). Manipuler et installer les cartouches avec soin.
6) Remplacer les cartouches après utilisation, et avant la date d'expiration de la solution imprimée sur la courroie noire.

US Pat. 5566406, 5695124, 5850641
CDN Pat. 2571661, 2575966

Buffered Isotonic Solution: 3.8 Gallons
Weight: 32 lbs.
Solución Isotónica Estabilizadora: 14,4 Litros
Peso: 14,5 kg
Solution Isotonique Tamponnée: 14,4 Litres
Poids: 14,5 kg

Drug Facts (for USA only)	Information
<p>Active Ingredient: Purpose: Purified water 98,6% Emergency Eyewash</p> <p>Uses For flushing or irrigating the eye to reduce chances of severe injury caused by acid, alkali or particulate contamination.</p> <p>Warnings: For external use only Do not use • if solution changes color or gets cloudy • in open wounds in or near the eyes • with contact lenses Stop use and ask a doctor if you have • changes in vision • eye pain • continued redness or irritation of the eye or if the condition worsens or persists Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.</p> <p>Directions • pull handle on the activating door to initiate flow • lower head into flow for 15 minutes • if necessary, continue flushing with emergency eyewash or shower • do not reuse • discard cartridge after use</p> <p>Other Information • store at room temperature, 59° to 86° F (15° to 30° C) • do not freeze</p> <p>Inactive Ingredients benzalkonium chloride, edetate disodium, sodium chloride, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic</p> <p>Questions? USA: 800-430-5490 Canada: 888-212-7233 Honeywell Safety Products USA, Inc. 855 S. Mint Street, Charlotte, NC, 28202</p>	<p>Usages Pour le rinçage ou l'irrigation de l'œil afin de réduire les risques de blessures graves causées par l'acide, l'alcali, ou la contamination particulaire.</p> <p>Advertissements Pour usage externe seulement Ne pas utiliser • si la solution changé de couleur ou si elle est broyée • dans les plaies ouvertes dans ou près des yeux Cesser d'utiliser la solution et consulter un médecin • si votre vision change • douleur oculaire • rougeur continuée ou une irritation de l'œil ou si l'état s'aggrave d'persiste</p> <p>Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antipoison.</p> <p>Mode d'emploi • tirez la poignée sur la porte d'activation pour amorcer l'écoulement • inférieure de la tête dans le flux pendant 15 minutes • si nécessaire, continuer de rincer avec une solution de rinçage oculaire d'urgence ou une douche • ne pas réutiliser • jeter le contenant après usage</p> <p>Autres Informations • conserver à température ambiante, 15° à 30° C (59° à 86° F) • ne pas congeler</p> <p>Ingrédients chlorure de benzalkonium, de sel disodique de l'acide éthylène diamine tétraacétique, chlorure de sodium, Feau purifiée, phosphate dibasique de sodium, phosphate monobasique de sodium</p> <p>Des questions? États-Unis: 800-430-5490 Canada: 888-212-7233 Honeywell Safety Products USA, Inc. 855 S. Mint Street, Charlotte, NC, 28202</p>

FENDALL PURE FLOW

purified water liquid

Product Information

Product Type

HUMAN OTC DRUG

Item Code (Source)

NDC:0498-0630

Route of Administration

OPHTHALMIC

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
WATER (UNII: 059QF0KO0R) (WATER - UNII:059QF0KO0R)	WATER	98.6 L in 100 L

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
BENZALKONIUM CHLORIDE (UNII: F5UM2KM3W7)	
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)	
SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE (UNII: 593YOG76RN)	
SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC (UNII: GR686LBA74)	
EDETATE DISODIUM (UNII: 7FLD91C86K)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:0498-0630-37	14.38 L in 1 CONTAINER; Type 0: Not a Combination Product	12/15/2018	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M018	12/15/2018	

Labeler - Honeywell Safety Products USA, Inc. (118768815)**Establishment**

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Keystone Industries		014769301	manufacture(0498-0630)

Revised: 6/2024

Honeywell Safety Products USA, Inc.